

TS

7000

快速、可靠、准确的 ppb 级 总硫分析仪



TSHR TS 7000 总硫分析仪的卓越性能，能无中断的连续运行，准确的完成总硫数据分析，是高要求和常规应用的理想解决方案。TS 7000 总硫分析仪配置高端的脉冲式紫外荧光检测器，符合严格的监管方法的同时，提供更优越的稳定性，更低的检出限和更出色的线性。

样品通过 HR 7000 液体自动进样器进入无氧区域加热，保证样品完全气化。气化的样品通过载气带入含氧气的两段式燃烧区中，充分的氧化燃烧。燃烧后的气体经过半透膜渗透管，去除水分和其他干扰杂质。

处理后的燃烧气进入紫外荧光检测器，氙灯发射紫外光激发燃烧气中的二氧化硫 SO₂ 分子，激发态的二氧化硫返回基态时释放出的光波通过光电倍增管检测，光波辐射强度与样品中的总硫浓度成正比。

HR 7000 液体样品全自动进样器的设计拥有高性能，可靠的自动进样功能，可配置 121 位进样盘，另外也可以选择带有加热或制冷功能的样品盘。

TS 7000 总硫分析仪可以分析低沸点和高沸点的各种液态样品和液化气/气体样品，完全遵循 ASTM, DIN, IP 和 CEN 标准方法。

关键优势

紧凑和坚固耐用的设计

准确、快速和可靠的
总硫分析数据

标配 HR 7000 液体样品全自动进样器，实现分析完全自动化

高性能的脉冲式
紫外荧光检测器

增强的液体
和液化气/气体应用范围



分析指标

样品基质*	有机液体
工作范围	0.03 - 10,000mg/kg
样品量	1 - 80 µL
分析时间	3 - 6分钟
相对标准偏差*	<2% (>1 ppm)
样品类型	高沸点和低沸点的样品
最高沸点	450°C (取决于样品的性质)
执行标准	ASTM D5453, ASTM D6667, ASTM D7183, ASTM D7551, ISO 20846, UOP987

*取决于典型应用和样品性质

技术参数

加热炉电压	2 x 24 V, 50/60 Hz
加热炉功率	2 x 300 W
加热炉温度传感器	2 x Ni-Cr/Ni
加热炉配置	两段式温度控制
加热炉温度	最高 1250 °C
分析类型	总硫 (紫外荧光硫) (可选项: 化学发光氮)
检测原理	脉冲式紫外荧光法
外型尺寸	600 x 1100 x 580mm (长 x 高 x 宽)
计算机操作系统	Windows 7 英文专业版或更高版本
计算机	Intel Core i3/ AMD Phenom 或更高配置
软件	Athena
标准配置**	HR 7000 液体样品全自动进样器, 使用 2ml 样品瓶
可选附件	GM 7000 液化气/气体进样器

** TS 7000 总硫分析仪操作时, 需要配置 HR 7000 液体样品全自动进样器

设备要求

电压	115/230 V, 50/60 Hz
功率	1200 W
气体连接	1/8" 连接管件
气体	氧气 (99.6%) 医用级 2.6 或者氧气 (99.995%) 4.5 氩气 (99.998%) 工业级 4.8
气体压力	2 - 3 Bar (30 - 45 psi)
环境温度	5 - 35 °C (41 - 95 °F)

联系方式

技术支持:	technicalsupport@tshrinternational.com
销售:	sales@tshrinternational.com
其他信息:	info@tshrinternational.com
TSHR 网站:	www.tshrinternational.com

更多详细信息请联系您当地的经销商

INTERMASS FISCHER-ASIA PTE LTD

北京仪方飞希尔科技有限公司

北京市朝阳区曙光西里甲6号时间国际A座1802室


电话: 010-5867 8333

传真: 010-5867 8301

邮箱: ifac@intermasschina.com

网址: www.intermass.com.cn

000.TSHR.PS.TS001.1

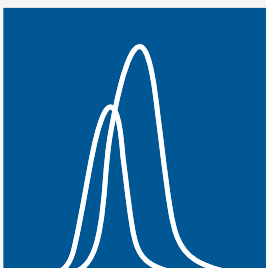

燃烧元素分析

领域的最佳

合作伙伴

